

マイクロ歯磨きブラシ

CITIZEN
Micro HumanTech

シチズン
電動ハブラシ EH310BU (ブルー)

- パワーが長持ちする乾電池式。
 - 歯垢予防に効果的なバス磨き方法。
 - ブラシは、天然鉱石を含有の半透明になっていますが、製品には問題ございません。
 - セット内容:本体(1本)ハブラシ(1本)単3アルカリ乾電池(1個)
- 手歯磨きと同様に動かしてお使い下さい。パイブレーションがブラッシング効果を高め、手歯磨きの3~5倍の歯磨き効果があります。



台紙



外箱:PVC

品質表示	
柄の材質	ポリプロピレン
毛の材質	ナイロン
毛のかたさ	ふつう
耐熱温度	80度



4 562191 600514

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 Tel.042-468-4607

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。

受付時間：10～17時
月～金(祝祭日、年末年始を除く)

☎ 0120-88-6295

通話料金は無料です。



E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp

日本製 MADE IN JAPAN

保証規定

この製品は当社の厳しい品質テストに合格した商品であることを証明いたします。お客様の正しい使用状態で万一故障した場合は、保証規定に従って1年間無料で修理いたします。

購入されたお店にお預けになるか当社に直接ご郵送ください。

●つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

- ① お買上から12ヶ月以降の故障。
- ② 本書のご提示がない場合。
- ③ 本書に必要な記入事項(お買上日、お買上の店名、同捺印)がない場合。
- ④ ご使用上の誤り(落下・水中使用など)、および不当な修理や改造による故障、損傷。
- ⑤ 火災又は天災による故障の場合。
- ⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

保証書

本書は、取扱説明書による正しい使用状態で、万一故障した場合に、本保証書規定に従ってお買い上げ後1年間は無料修理を行うことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お買い上げ日		年	月	日
ご芳名	様		ご住所	
	TEL	()		
お買い上げ店	住所			印
	店名			

発売元 シチズン・システムズ株式会社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 Tel.042-468-4607

シチズン 電動ハブラシ EH310BU (ブルー) [取扱説明書]

正しくお使いいただくため、ご使用前にこの[取扱説明書]をよくお読みください。

●品番:EH310BU ●電源:単3形アルカリ乾電池1個 日本製 MADE IN JAPAN

この製品は当社の厳しい品質テストに合格した商品である事を証明いたします。お客様の正しい

使用状態で万一故障した場合は購入されたお店にお預けになるか当社に直接ご郵送ください。


商品に関するご相談、お問い合わせは弊社お客様相談室(表記)までご連絡ください。

※工場出荷時に、新品の電池を入れておりますが、保管状態、期間などにより、若干消耗する場合があります。

※平均計算で1回3分のご使用で約60回以上ご使用いただけます。(アルカリ乾電池)


乾電池の扱い方

1. 初めてお使いになるときは電池カバーをはずして(左回り)絶縁シートを抜いてください。
2. 電池カバー・ホルダーを本体に差し込み、●マークがスイッチの中央に合うまで右に回して組み込んでください。
3. 電池を交換するときは電池の⊕を底側にして入れてください。

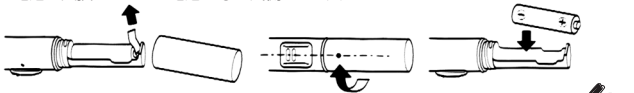


歯ブラシの使い方

1. ハブラシの毛をスイッチ側にして本体に差し込みます。取り外すときはブラシをねじらずまっすぐ引き抜いてください。
2. 使用後はスイッチをOFFに戻し、ブラシを外して水洗いし水分をよく切ってください。
3. 本体やスイッチ回りの汚れは、弱い水流で洗った後拭き取ってください。

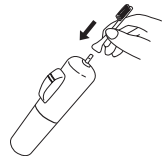

シチズン 標準替ハブラシについて

- 替ハブラシは右図のようにブラシの毛先が広がら植毛部の幅よりはみ出したら取り替え時期です。新しいハブラシとお取り替えてください。
- 替ハブラシは、本品をお買い上げの販売店、薬局・店、ホームセンターなどでお買い求めください。
- シチズン替ハブラシは他社製(一部国産、輸入品の特殊モデルを除く)のハブラシもお使いいただけます。(本体ホルダーと替ハブラシが正しくはいることをご確認ください。)

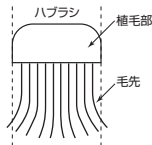

■製品仕様●品番:EH310BU●電源電圧DC1.5V(単3アルカリ乾電池)●振動数:約6500回/分(無負荷時)

●外形寸法(1本):φ25×190mm(ハブラシ装着時)●重量(1本):約70g(本体・ハブラシ・乾電池)

■お手入れのご注意

●本製品のお手入れには、シンナー・ベンジンあるいはアルコール等の溶剤は使用しないでください。

安全上のご注意

ケガや故障、破損の原因となりますので、以下の点にご注意ください。

- 歯や歯ぐきの病気にかかっている方、歯の治療を受けておられる方は、歯科医にご相談の上ご使用ください。
- 本商品を歯磨き以外の目的でお使いにならないでください。
- お子様がお使いになるときは正しい使い方をお教えてください。
- 本体を水中に放置したり、濡れた状態でスイッチの操作をしないでください。
- 本体を落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光が当たるところや暖房器具など発熱体の近くに放置しないでください。
- 40℃をこえるお湯で洗わないでください。
- 本商品を分解したり内部に触れたりしないでください。
- 動作中無理に停止させないでください。
- 携行中及び長時間使用しないときは、電池を本体からはずしておいてください。
- 本商品の使用により体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- 長時間使用しない場合は、電池は取り外して保管してください。
- 電池は単3アルカリ乾電池以外は使用しないでください。

シチズン 標準替ハブラシ

品番	毛のかたさ	軸の色	本数
SP05S4	ふつう	ホワイト	4

●4本入りセット
¥500 標準小売価格(税抜き)

※EH310電動ハブラシには、他社製の替ハブラシもご使用いただけます。(一部国産、輸入品の特殊モデルを除く)