

## 主な仕様



型式	CHUA516	CHUA715	CHUA716-BK
希望小売価格(税込)	オープン価格		
寸法	約105(幅)×166(高さ)×132(奥行)mm		
質量(電池含まず)	本体:約400g、カフ(腕帯):約150g		
カフ(腕帯)	ハードカフ		
適用腕周範囲	約17.0~36.0cm		
メモリー	90回分	90回×2人分	
朝・夜メモリー	—	●	
測定日時表示	●	●	
平均値	最新3回	最新3回、朝・夜、最新7日間	
血圧分類表示	●※1	●※1	
脈間隔変動マーク	●	●	
体動マーク	●	●	
カフ巻きエラーマーク	●	●	
日時表示	●	●	
電源	単3形乾電池×4本または単3形ニッケル水素充電電池×4本※2		
ACアダプター対応	—	●(別売りAC-230CZ-J)	
充電池対応	—	●※2	
電池寿命	アルカリ乾電池:約500回/マンガン乾電池:約150回 ※3		
付属品	カフ(腕帯)一式、単3形アルカリ乾電池(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書		
販売名	シチズン上腕式血圧計 CHUAシリーズ		
医療機器認証番号	22BADBZX00030000		
JANコード	4562191602181	4562191602198	4562191602204

## 梱包情報

個装箱サイズ	144(幅)×142(奥行)×187(高さ)mm / 約810g
--------	----------------------------------

※1:世界保健機構(WHO)/国際高血圧学会(ISH)の血圧分類に基づく

※2:取扱説明書に記載の充電電池使用の場合

※3:1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合

## ■ お問い合わせ、ご用命は…

商品に関するご相談・お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。  
受付時間:10~17時 月~金(祝祭日、年末年始を除く) 通話料金は無料です。

# 0120-88-6295

- CITIZENは、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
- ご購入の際は、販売店、購入年月日等を記入した保証書を必ずお受け取りのうえ、大切に保管してください。
- 製品の仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷の関係で実際の色とは若干異なる場合があります。
- 製品に不明な点がありましたらお問い合わせ先はシチズンシステムズ株式会社 お客様相談室までお問い合わせください。
- 本体画面の数値は一例です。

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

<http://www.citizen-systems.co.jp>

E-mail: [support@systems.citizen.co.jp](mailto:support@systems.citizen.co.jp)

# CITIZEN

## シチズン上腕式血圧計

ハードカフ



## CHUA516 CHUA715 CHUA716-BK

# 片手でも巻きやすいハードカフで かんたん装着

CHUA516 CHUA715 CHUA716-BK

ハードカフ



## 腕にフィットしやすい ハードカフ

- ・巻きやすく装着がかんたん
- ・適用腕周範囲は17~36cm
- ・細腕にも対応

## やさしい肌触り

- ・触り心地がなめらか
- ・汚れがつきにくい、目立たない

シチズンが独自に開発・設計したカフ形状により、2層の圧迫機構で測定に必要な圧力が均一化され、測定値がより安定しやすくなりました\*。  
適用腕周範囲は17~36cmで、腕の細い女性から腕の太い男性まで使用できます。  
※当社比



コンパクトな省スペースボディ

※図は、CHUA715

## 使いやすさにこだわった親切設計

- 大画面液晶に見やすい表示
- 操作性の良い大きな測定ボタン
- 平均値表示
- 脈間隔変動マーク・体動マーク
- 測定結果を日付・時刻とともにメモリー

背面にカフを  
収納できます。



ハードカフモデルのラインアップ



CHUA516

測定値が見やすい  
大画面モデル

90回分メモリー



CHUA715

2人分の測定値を  
メモリー

90回×2人分、  
朝・夜メモリー

ACアダプター対応 (別売)



CHUA716-BK

スタイリッシュな  
ブラックモデル

本体前面UV塗装

90回×2人分、  
朝・夜メモリー

ACアダプター対応 (別売)




## 6段階の 血圧分類表示

※1

測定値のレベルが  
ひと目で分かる  
血圧分類表示。

世界保健機構 (WHO) /  
ISH (国際高血圧学会)  
による血圧分類表

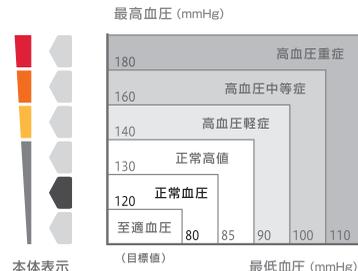

## 置時計として 使用可能

測定しないときは  
3パターン  
の表示から選べる  
置時計として  
使用できます。



1. 日大表示



2. 時間大表示



3. 小表示



## 「カフ巻きエラーマーク」

カフ(腕帯)の巻き方が緩い場合、「カフ巻きエラーマーク」  
で分かりやすくお知らせします。



## ニッケル水素充電電池に対応

※2